

CAMEO®DISK Silver, Gold & Rhodium

MADE IN FRANCE

Disques de prépolissage pour la métallographie

Le prépolissage en métallographie consiste à retirer les rayures profondes de l'étape de dressage et à préparer l'échantillon pour le polissage final. Les CAMEO®DISK sont des supports composites développés pour le prépolissage d'échantillons métallographiques. Ils sont utilisés avec les abrasifs liquides BIO DIAMANT® NEODIA®.

Avantages


DURABILITÉ - Les CAMEO®DISK sont réutilisables plusieurs dizaines de fois en fonction des paramètres de prépolissage. Cela réduit incontestablement la quantité de déchets contrairement à l'utilisation de disques de polissage.

ABRASION OPTIMISÉE - La structure en alvéoles brevetée optimise les caractéristiques abrasives pour réduire le temps de préparation de l'échantillon.

MEILLEURE DISTRIBUTION DU LIQUIDE - Les réservoirs formés par la structure brevetée optimisent la distribution du liquide abrasif. Ils minimisent le volume de liquide abrasif utilisé pour le prépolissage ce qui réduit le coût de la préparation des échantillons.


Il existe trois variantes de CAMEO®DISK conçues avec une dureté adaptée aux différents types de matériaux prépolis.

CAMEO®DISK	Application	Liquides abrasif
SILVER	Alliages ferreux mi-durs à très durs	Abrasif diamant NEODIA® M, P ou F - 6 à 15 µm
GOLD	Alliages non ferreux tendres	Abrasif diamant NEODIA® M, P ou F - 3 à 6 µm
RHODIUM	Céramiques et Cermets	Abrasif diamant NEODIA® M, P ou F - 1 à 3 µm

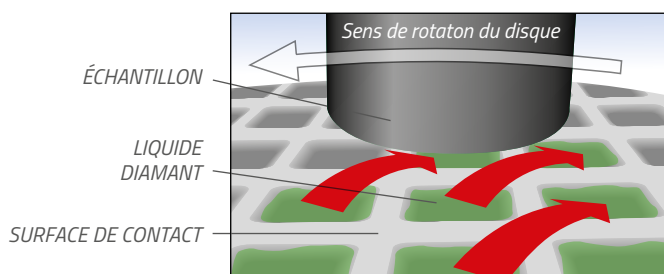

Patented

Les CAMEO®DISK sont disponibles en version autocollante ou magnétique et sont adaptables avec les différents accessoires de fixation LAM PLAN.

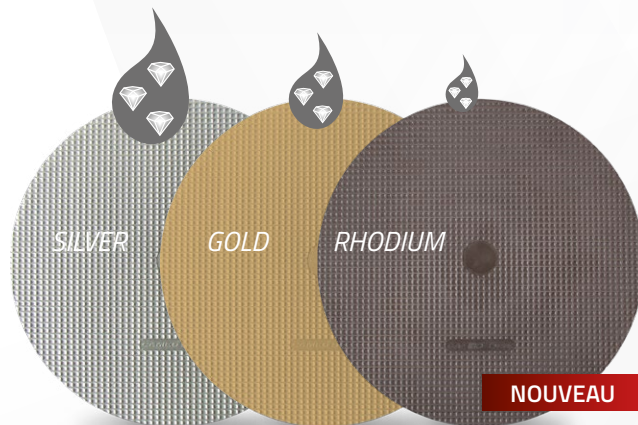

Breveté

Disques non diamantés utilisés avec des abrasifs diamant libres

GAMME CAMEO®DISK

Ø en mm	Autocollant	Magnétique
	Réf. boîte de 2 pièces + 1 outil de dressage	Réf. boîte de 2 pièces + 1 outil de dressage
CAMEO®DISK SILVER		
200	09 CA120 20	09 CA520 20
230	09 CA120 30	09 CA520 30
250	09 CA120 40	09 CA520 40
300	09 CA120 50	09 CA520 50
CAMEO®DISK GOLD		
200	09 CA130 20	09 CA530 20
230	09 CA130 30	09 CA530 30
250	09 CA130 40	09 CA530 40
300	09 CA130 50	09 CA530 50
CAMEO®DISK RHODIUM		NOUVEAU
200	09 CA100 20	09 CA500 20
230	09 CA100 30	09 CA500 30
250	09 CA100 40	09 CA500 40
300	09 CA100 50	09 CA500 50

OUTIL DE DRESSAGE DIAMANT

Caractéristiques	Qté.	Réf.
100 x 15 x 5 mm	1	98 BD001 00

L'outil de dressage diamant est utilisé pour régénérer l'efficacité et la planéité du CAMEO®DISK

